

*Lupas Binoculares Quirúrgicas Eighteeth*  
**Brilliance 48° Pro**

---

Imágenes Sin Esfuerzo, Uso Profesional

---




# Estructura Óptica Única: Hombro y Cuello Libres

Brilliance 48°Pro

Estructura óptica innovadora diseñada para desviar la trayectoria óptica de las lupas dentales hacia abajo 48 grados

– Mantener la espalda y el cuello en posición erguida, protegiendo eficazmente la salud de la columna

\*Las investigaciones indican que trabajar durante períodos prolongados con el cuello y la espalda doblados puede ejercer una presión inmensa sobre toda la columna, lo que provoca desgaste o desgarros del disco, lo que tiene implicaciones duraderas para la salud del doctor a lo largo del tiempo.

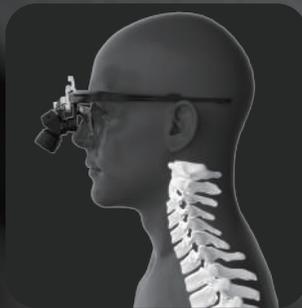


# Imágenes Nuevas y Actualizadas: Sin Ajustes Complejos

- Nueva estructura óptica: Diseño optimizado de lentes y marcos para un campo de visión más amplio y claro




# Ajuste flexible de la distancia de la pupila y el enfoque para evitar la fatiga visual

- La distancia de la pupila se puede ajustar por separado, coordinando la visión de ambos ojos y aliviando la fatiga ocular causada por la convergencia visual
- La distancia focal se puede ajustar de forma independiente, resolviendo eficazmente la borrosidad de la imagen causada por las diferencias en la visión entre los ojos izquierdo y derecho, reduciendo así la presión de enfoque en los ojos

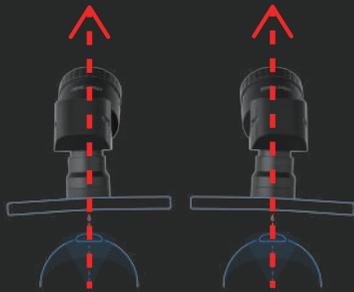

## Brilliance 48° pro

Campo de visión paralelo  
Reduce la tensión de los músculos rectos intraoculares

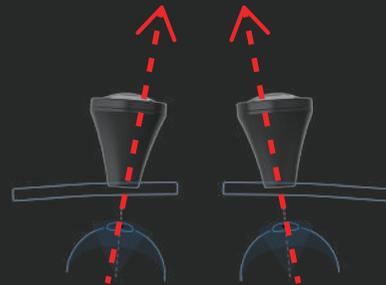

## Lupas Convencionales

Visión binocular convergente hacia adentro  
Intensificar la tensión de los músculos rectos intraoculares

## Aumento 5x: Todos los detalles orales de un vistazo

- Proporciona un aumento de 5x y hasta 81 mm de campo de visión máximo

## Visión clara para procedimientos dentales precisos

- El diseño de trayectoria óptica acromática optimizada garantiza capacidades superiores de corrección de color
- El vidrio Schott proporciona una mayor penetración de la luz visible, lo que da como resultado imágenes claras y de alta calidad



Brilliance 48° pro



lupas convencionales



# ***Diseño Revolucionario de Almohadillas para la Nariz: Experiencia de Uso de Nivel Profesional***

**Viene con dos almohadillas nasales ajustables para satisfacer las necesidades clínicas en una lupa**

## **Almohadilla Nasal de Goma Ancha y Suave**

- Fleje de acero pre curvado integrado
- Altura ajustable
- Fácil adaptación del puente nasal



## **Almohadilla nasal de conexión directa**

- Uso directo sin necesidad de quitarse las gafas graduadas
- Elimina errores causados por la prescripción ocular
- Garantizar una distancia de trabajo precisa



## **Diseño ergonómico para una experiencia cómoda**

– Centro de gravedad desplazado hacia atrás para reducir la presión del puente nasal

## **Marco recientemente actualizado para una fácil personalización de la lente**

– Montura con clip desmontable para cambiar rápidamente las lentes



# Especificaciones

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Relación de Magnificación | 5X  |
| Distancia de Trabajo      | 350~400mm,400~450mm<br>450~500mm,500~550mm(opcional)  |
| Distancia inter pupilar   | 52-76mm<br>(ajustable individualmente en ambos lados) |
| Peso                      | 94.3g(con marco)                                      |
| Campo de Visión           | 49~57mm,57~65mm<br>65~73mm,73~81mm                    |
| Color                     | Negro/Plata   |

\*Adaptado al faro inalámbrico Eighteeth

